

Dermatophyte Test Strip

FungiCheck Tinea Unguium



GEEN DURE CURSUS



MAAR 10 MINUTEN VAN UW TIJD



KOSTENBESPAREND OP IEDERE TEST



UITVOERBAAR TIJDENS HET GEBRUIK VAN
ANTISCHIMMEL MEDICIJNEN


WWW.HFLLABORATORIES.COM | WWW.FUNGICHECK.COM

HFL LABORATORIES BV | DE HOOGT 59 | 5175 AX LOON OP ZAND
T. +31 (0)13 4551749 | INFO@HFLLABORATORIES.COM

DE REVOLUTIONAIRE INNOVATIE

Dermatophyte Test Strip

FungiCheck Tinea Unguium

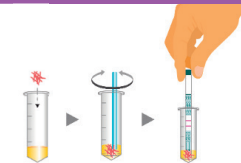

DERMATOPHYTE PROFESSIONAL TEST STRIP

TEST UW CLIENTEN OP TINEA UNGUIUM IN UW EIGEN PRAKTIJK

HFL LABORATORIES | ESTABLISHED IN THE NETHERLANDS SINCE 2005

DE REVOLUTIONAIRE INNOVATIE

De FungiCheck is een immunochromatografische kit voor de professional om Dermatofyten te detecteren in een nagel sample.

Dermatofyten zijn schimmels die keratine vereisen voor groei. Deze schimmels kunnen infecties van de huid, haar en nagels veroorzaken. Omdat Dermatofyten keratine vereisen om te groeien, zijn ze beperkt tot haar, nagels en de oppervlakkige huid. Dermatofytose worden aangeduid als 'Tinea' infecties.

De FungiCheck test strip beperkt zich tot het testen van de aanwezigheid van Tinea Unguium oftewel Onychomycosis in de nagels. (uitgezonderd Candida & gisten)


Voorbeelden van Tinea Unguium uitingen:

- Laterale onychomycosis. Een witte of gele strook aan één zijde van de nagel.
- Hyperkeratose. Loslatende laagjes onder de nagel.
- Distale onycholyse. Het einde van de nagel komt omhoog. De vrije rand brokkelt vaak.
- Oppervlakkige witte onychomycosis. Schilferige witte vlekken en putjes op de bovenkant van de nagelplaat.
- Proximale onychomycosis. Gele vlekken verschijnen in de Lunula.
- Volledige vernietiging van de nagel.

HOE WERKT HET?

De FungiCheck Test Kit bevat 10 complete tests. Inclusief 10 test strips, extraction vloeistof, 10 test tubes en 10 roerstaafjes.

De test moet altijd uitgevoerd worden door een professional met enige ervaring in steriel handelen. De test is zeer makkelijk in gebruik. Met enkel 1mg nagel sample en 10 minuten van uw tijd kunt u al het resultaat aflezen van de test strip.

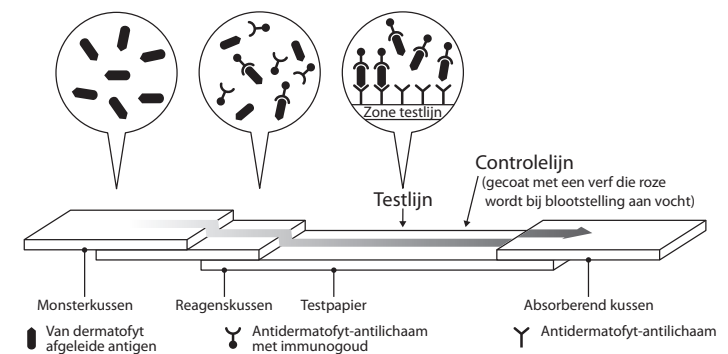

De test strip in de FungiCheck kit bestaat uit een monsterlaag, een reagens strip, een beslissing strip en een absorberend kussen. Door de extra controlelijn kunt u goed zien of uw sample correct is opgenomen door de test strip.

